

JOHN BUNN®  
A Graham-Field Brand  
DigiOx  
Finger Pulse Oximeter



Operation Manual

**Important: Do not operate the John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter without first reading and understanding this manual! Save this manual for future use.**

**Note: The most current version of this manual can be found online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)**

JB02008-INS-LAB-RevA09

▲ Cautions

To ensure patient safety, use only parts and accessories specified in this manual.

Keep the oximeter away from dust, vibration, corrosive substances, explosive materials, high temperature and moisture.

If the oximeter gets wet, stop operation immediately and do not resume operation until it is dry. When it is carried from a cold environment to a warm and/or humid environment, allow it to warm to room temperature before using it. DO NOT use sharp objects to press the front panel button.

DO NOT sterilize this device. Do not subject this device to irradiation, steam, ethylene oxide, high temperature, or immersion in liquid. Refer to the Repair and Maintenance/Cleaning and Disinfection section of this manual for instructions for cleaning and disinfection.

6. To change the oximeter's display screen brightness, press the Power/Display Button for more than one second. There are 10 brightness levels, and the level, from "BR 1" to "BR 10", will show on the screen during brightness adjustment. The default is level four. Keep the Power/Display Button depressed for as long as it takes to cycle to the desired brightness level.

7. The oximeter will automatically turn off if no finger is sensed for 8 seconds. If the finger is removed and the Power/Display Button is pressed, the oximeter will remain on and change screens, but will display "FINGER OUT".

ACCESSORIES (INCLUDED)

- 1 One lanyard
- 2 Two AAA alkaline batteries
- 3 One operation manual

REPAIR, MAINTENANCE, AND DISPOSAL

⚠ **WARNING:** DO NOT open the oximeter housing. It contains no serviceable parts. Service must be performed by trained, authorized personnel only. Otherwise, device failure and health hazard may occur.

Maintenance


In order to ensure the oximeter's longevity and continued dependable operation, please observe the following maintenance recommendations.

CONTENTS

INTRODUCTION .....	3
INTENDED USE .....	3
CONTRAINDICATIONS.....	3
IMPORTANT SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE .....	3
OVERVIEW .....	7
APPEARANCE .....	7
FEATURES .....	7
NAME AND MODEL .....	8
BATTERY INSTALLATION .....	8
OPERATION INSTRUCTIONS .....	8
ACCESSORIES (INCLUDED) .....	11
REPAIR, MAINTENANCE, AND DISPOSAL.....	11
MAINTENANCE.....	11
CLEANING AND DISINFECTION .....	12
DISPOSAL .....	13
TROUBLESHOOTING .....	13
SYMBOL KEY .....	15
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	16
LIMITED WARRANTY .....	18
MANUAL DE OPERACIÓN (ESPAÑOL) .....	21

OVERVIEW

Appearance

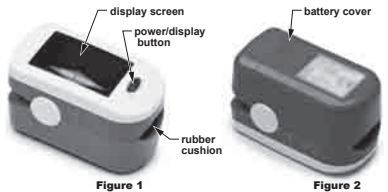

The DigiOx Finger Pulse Oximeter is shown above.

Features

The John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter provides a simple way to spot-check patients by combining the sensor and monitor into one integrated, compact, easy-to-use device with single-button operation. The oximeter can accurately measure oxygen saturation and pulse rate. When a finger is inserted into the sensor's rubber cushion, and the Power/Display Button is pressed to turn the oximeter on, then the SpO<sub>2</sub> value and pulse rate value display on the screen. The oximeter features a bright-color LED screen with adjustable brightness and multi-directional displays that enable the user to read results

INTRODUCTIONS

Dear User: Please read and understand all instructions before using the John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter, JB02008.

Intended use

The John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter is used to measure oxygen saturation (SpO<sub>2</sub>) and pulse rate in home or clinical settings. It is designed for adult and pediatric patients.

Contraindications

⚠ **WARNING:** The oximeter is not intended for continuous patient monitoring. DO NOT use the oximeter while patient is undergoing MRI or CT scanning.

Important Safety Guidelines - Please Read Before Use

The safety statements presented in this chapter refer to the basic safety information that the operator of the John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter shall pay attention to and abide by. There are additional safety statements in other chapters or sections, which may be the same as or similar to the following, or specific to the operations.

⚠ **WARNING:** Indicates a potential hazard situation or unsafe practice that, if not avoided, could result in death or serious injury.

from any angle. The oximeter features a low voltage indicator, powers off automatically in eight seconds when not in use, and provides approximately 30 hours of use with the use of alkaline batteries.

Name and Model

Name: John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter

Model: JB02008

BATTERY INSTALLATION

1. Refer to Figure 3; insert two AAA batteries, oriented as shown, into the battery compartment.
2. Replace the cover.

*Note: Ensure that the batteries are correctly installed. Incorrect installation will prevent the device from operating.*

OPERATION INSTRUCTIONS

Notes:

*Clean the test finger with isopropyl alcohol before and after each measurement. Ensure that the finger is dry before being inserted into the oximeter.*

*Do not shake the finger; keep finger motionless during oximeter use.*

Disposal

Do not treat this device or its batteries as household waste. Separate collection is required.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Reason	Solution
The device does not turn on	SpO <sub>2</sub> and Pulse Rate display unstable or hard to see	Reposition finger correctly and try again
	Finger is shaking or patient is moving	Ensure patient remains immobile
	Patient's SpO <sub>2</sub> value is too low to measure	⚠ Remeasure; if unsuccessful, yet device is functioning correctly, contact a medical professional immediately
	Excessive ambient light	Reduce ambient light

LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. warrants the John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter, Model JB02008, for a period of one year against manufacturer's defects. If a product is deemed to be under warranty, GF Health Products, Inc. shall provide, at its option, (1) replacement of any defective part or product or (2) a credit of the original selling price made to GF Health Products, Inc.'s initial customer. The warranty does not include any labor charges incurred in replacement part(s) installation or any associated freight or shipping charges to GF Health Products, Inc.

▲ **Caution:** Indicates a potential hazard or unsafe practice that, if not avoided, could result in minor personal injury or product/property damage.

*Note: Provides application recommendations or other useful information to ensure that you get the most from your product.*

⚠ WARNINGS:

**Important! Read and understand this manual before using the oximeter. Do not use this device without proper instruction from a Healthcare Professional. If the oximeter is not properly operated, personal injury and/or damage to the oximeter could result.**

If components are damaged or missing, contact your dealer immediately. DO NOT use substitute parts.

Inspect the device before use to ensure that there is no visible damage that may affect patient or user's safety or measurement performance. Thereafter, inspect the device at least once a week.

GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation or use of this product.

DO NOT open the oximeter housing. It contains no serviceable parts. Service must be performed by trained, authorized personnel only. Otherwise, device failure and health hazard may occur.

*Avoid placing the device on a limb which is wrapped with a cuff for blood pressure measurement or undergoing venous infusion.*

*Ensure that no obstruction (contamination, scar tissue, fingernail polish, acrylic fingernail, etc.) exists at the site where the sensor is placed; such obstruction could affect the signal received by the sensor and result in an incorrect measurement.*

*Vigorous exercise and electrosurgical device interference may affect the measuring accuracy.*

1. Open the clip as shown in Figure 4.
2. Insert finger, nail up, into the clip's rubber cushion (ensure that the finger is correctly positioned), and then gently clip the finger.
3. Press the Power/Display Button to turn the oximeter on.
4. The screen will then display the data as shown in Figure 5. After the values become stable, the user can read the information on the display screen.
5. When the screen displays as shown in Figure 5, pressing the Power/Display Button will change the screen's orientation:

**EXPLOSION HAZARD:** Do not use the oximeter in the presence of flammable anesthetics, explosive substances, vapors or liquids.

The oximeter is designed for real-time and rapid measurement. It is not suitable for long-time continuous patient monitoring. DO NOT apply the sensor to the same finger for more than two hours. If any readings are found to be abnormal, please change the position of the sensor.

The oximeter is intended only as an adjunct in patient assessment. It must be used in conjunction with clinical signs and symptoms. It is intended as a measuring, not a treatment, device.

Magnetic and electrical fields are capable of interfering with the proper performance of the oximeter. For this reason, ensure that all external devices operated in the vicinity of the oximeter comply with the relevant EMC requirements. Mobile phones, X-ray equipment, and/or MRI devices are a possible source of interference, as they may emit high levels of electromagnetic radiation. This device complies with IEC60601-1-2.

DO NOT clip this device on edema or tender tissue.

The infrared light emitted from the device (it is invisible) is harmful to the eyes. DO NOT stare into the light.

Keep this device out of the reach of children.

- a. Press the Power/Display Button once more; the screen will rotate 180° and display as shown in Figure 6.
- b. Press the Power/Display Button once more; the screen will rotate 90° and display as shown in Figure 7.
- c. Press the Power/Display Button once more; the screen will rotate 180° and display as shown in Figure 8.
- d. Press the Power/Display Button once more; the screen will rotate -90° and also show pulse as a filled wave-form bar graph along bottom of screen, as shown in Figure 9.
- e. Press the Power/Display Button once more; the screen will now show pulse as a hollow wave-form bar graph along bottom of screen, as shown in Figure 10.
- f. Press the Power/Display Button once more; the screen will return to the original screen as shown in Figure 5 on previous page.

SYMBOL KEY

Symbol	Description
	Type BF
	Warning: See operation manual
<b>%SpO<sub>2</sub></b>	The pulse oxygen saturation
<b>♥ bpm</b>	Pulse rate (beats per minute)
	Low battery voltage
SN	Serial number
	Not for continuous monitoring

USA Corporate Headquarters:

**GF Health Products, Inc.**  
2935 Northeast Parkway  
Atlanta, Georgia 30360  
© 2009 GF Health Products, Inc.  
Made in China  
telephone: 800-347-5678, 770-447-1609  
fax: 800-726-0601, 678-291-3232



**GRAHAM-FIELD**  
[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Graham-Field and John Bunn are registered trademarks of GF Health Products, Inc.

Packaging, warranties, products, and specifications are subject to change without notice.

GF Health Products, Inc. is not responsible for typographical errors.



JOHN BUNN®  
A Graham-Field Brand  
DigiOx  
Oxímetro de Uso Dactilar



Manual de Operación

Importante: No debe operar el John Bunn DigiOx Oxímetro sin leer y entender este manual! Guarde este manual para uso en el futuro.

Nota: La más reciente versión de este manual podrá ser encontrado en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

JB02008-INS-LAB-RevA09

**▲ Precauciones:**  
Para asegurar la seguridad del paciente, use partes y accesorios solamente especificados en este manual.  
Garde al oxímetro lejos de polvo, vibración, sustancias corrosivas, materiales explosivos, temperaturas altas y humedad.  
Si el oxímetro se moja, por favor de parar de usarlo. Cuando se mueve de un ambiente frío a un ambiente caliente y con humedad, por favor de no usarlo inmediatamente. Cuando el aparato se cambia de un ambiente frío a uno caliente o húmedo, permita que se caliente a la temperatura del cuarto antes de usarlo.  
NO DEBE apretar el botón al frente con objetos afilados.  
NO DEBE esterilizar este aparato. NO DEBE sujetar este aparato a la irradiación, al vapor, al óxido de etileno, a la temperatura alta, o a la inmersión en líquido. Refiere a la sección de Reparación y Mantenimiento / Limpiando y Desinfectando de este manual para instrucciones para limpiar y desinfectar.

6. Para cambiar el brillo de la pantalla, presione el Botón del Prender/Apagar y Mostrar para más de un segundo. Hay 10 niveles del brillo, y el nivel, del “BR 1” al “BR 10”, mostrará en la pantalla durante el ajuste del brillo. El valor predeterminado es el nivel 4. Mantenga el Botón del Prender/Apagar y Mostrar presionado por el tiempo que sea necesario para el ciclo con al nivel de brillo deseado.  
7. El oxímetro se apagará automáticamente si no se detecta el dedo durante 8 segundos. Si se quita el dedo y se presiona el Botón del Prender/Apagar y Mostrar, el oxímetro quedará orientado y cambiará la pantalla, pero mostrará “FINGER OUT”.

ACCESORIOS (INCLUIDOS)

- 1 Cordon
- 2 AAA Baterías alcalinas
- 3 Un Manual de Operación

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

⚠ Advertencia: NO DEBE abrir la carcasa del oxímetro. No contiene partes servibles. Servicio debe ser hecho solamente por personal autorizado. Si no, falla del aparato y daño a la salud puede ocurrir.


Mantenimiento

Para asegurar la longevidad y operación continua segura del oxímetro, por favor observe las siguientes recomendaciones para mantenimiento.

CONTENIDOS.....	3
INTRODUCCIÓN.....	3
USO ENTENDIDO DEL OXÍMETRO.....	3
CONTRAINDICACIONES.....	3
DIRECTIVAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO.....	3
GENERALIDADES.....	7
APARIENCIA.....	7
CARACTERÍSTICAS.....	7
NOMBRE Y MODELO.....	8
INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS.....	8
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....	8
ACCESORIOS (INCLUIDOS).....	11
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	11
MANTENIMIENTO.....	11
LIMPIAR Y DESINFECTAR.....	12
DESTRUCCIÓN.....	13
DETECTANDO PROBLEMAS.....	13
SÍMBOLOS.....	15
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	16
GARANTÍA LIMITADA.....	18

GENERALIDADES

Apariencia

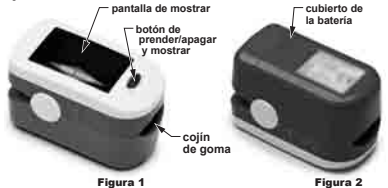

El DigiOx Oxímetro se demuestra arriba.  
**Características**  
Este John Bunn DigiOx Oxímetro de uso Dactilar provee un método simple para chequear a los pacientes combinando un sensor y monitor en un aparato integrado y compacto que es fácil de usar y que tiene operación de un botón. El John Bunn DigiOx Oxímetro de uso Dactilar puede ser usado para medir el valor de la saturación de oxígeno (SpO<sub>2</sub>) y el valor de frecuencia de pulso. Poniendo su dedo en el sensor y apretando el Botón de Prender, el valor de SpO<sub>2</sub> y de frecuencia de pulso se vera en la pantalla. El oxímetro tiene una pantalla de LED con color brillante que da más colores vibrantes y tiene una vida de operación mas larga. El brillo de la pantalla es ajustable. La pantalla es de dirección múltiple para que el usuario pueda leer los resultados de cualquier ángulo. El oxímetro

Cambie las baterías cuando el indicador del voltaje bajo que se ve en la pantalla.	
Limpie la superficie del aparato antes de uso. Limpie el aparato con la gasa suave y saturarlo con la solución de 70% isopropilico alcohol primero; déjalo que se seque. Repitalo si es necesario.	
Saque las baterías del oxímetro si no va usar el aparato por un periodo de tiempo largo.	
Ambiente (Nota: Humedad puede reducir o dañar la vida del aparato)	Operación: 41°F - 104°F (5°C - 40°C), 15% - 80% RH Almacenaje: -4°F - 158°F (-20°C - 70°C), < 93% RH

Limpiar y Desinfectar

- No debe sumergir este aparato en líquidos. Limpia solamente con la técnica de limpiar superficie. Debe usar la gasa suave y saturarlo con la solución de 70% isopropilico alcohol.
  - Limpie con un paño suave y limpio saturado en agua limpia. Sécalo con un paño seco y limpio.
- ▲ Precaución: No debe esterilizar este aparato. No debe sujetar este aparato a la irradiación, al vapor, al óxido de etileno, a la temperatura alta, o a la inmersión en líquido.  
▲ Precaución: No debe usar el sensor si está dañado.

INTRODUCCIÓN

Estimado usuario: Por favor de leer y entender las instrucciones antes de usar el John Bunn DigiOx Oxímetro de uso Dactilar JB02008. Guarde estas instrucciones para uso en el futuro.

Uso Entendido del Oxímetro

El John Bunn DigiOx Oxímetro es entendido para medir la saturación de oxígeno (SpO<sub>2</sub>) y la frecuencia de pulso en escenarios de casa y clínicas. Es diseñado para pacientes adultos y pediátricos.

Contraindicaciones

⚠ Advertencia: El oxímetro no es entendido para monitoreo continuo al paciente. NO DEBE usar el oxímetro cuando el paciente está debajo de un MRI o exploración de CT.

DIRECTIVAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD – por favor de LEER ANTES DE USO

Las declaraciones de seguridad presentado en este capítulo refieren a la información de seguridad básica que el operador del John Bunn DigiOx Oxímetro de uso Dactilar debe ponerle atención y seguirlo. Hay declaraciones de seguridad adicionales en otros capítulos o secciones, cuales pueden ser lo mismo o similar a lo siguiente o especifico a la operación.  
⚠ Advertencia: Indica una situación de peligro o una práctica insegura que, si no es evitado, puede resultar en muerte o heridas serias.

tiene un indicador de voltaje bajo. El oxímetro se apagará automáticamente en 8 segundos cuando no está en uso. El oxímetro provee aproximadamente 30 horas de uso usando baterías alcalinas.

Nombre y Modelo

Nombre: John Bunn DigiOx Oxímetro de Uso Dactilar  
Modelo: JB02008

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Refiere a la Figura 3; Inserta dos AAA baterías en el compartimiento correctamente en su dirección correcta.
  - Coloque el protector.
- Aviso: Asegurase instalar las baterías correctamente. Instalación incorrecta puede hacer que el aparato no funcione.*



Figura 3  
instalación de las baterías

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Avisos:

*Limpie el dedo de la prueba con el alcohol isopropilico antes y después de cada medida. Asegure que el dedo está seco antes de insertarlo en el oxímetro.*  
*No debe hacer temblar su dedo cuando estás usando el aparato.*  
*Evite poner el aparato en el mismo brazo donde tiene el medidor de presión o cuando se está haciendo una infusión venosa.*

Destrucción

No debe tratar este aparato o sus baterías como residuos de domésticos - colección separado es necesario

DETECTANDO PROBLEMAS

Problema	Razón Posible	Solución
El SpO <sub>2</sub> y Frecuencia de Pulso no son estables	El dedo no está puesto correctamente en el aparato	Coloque el dedo correctamente y trato de nuevo
	El dedo está temblando o el paciente se está moviendo	Asegure que el paciente se quede inmóvil
	El valor de SpO <sub>2</sub> del paciente es demasiado bajo medir	⚠ Media de nuevo; si no tiene éxito, sin embargo, el aparato está funcionando correctamente, póngase en contacto con a un profesional médico inmediatamente
Hay luz ambiental excesiva		Reduzca la luz ambiental

GARANTÍA LIMITADA

GF Health Products, Inc. garantiza el John Bunn DigiOx Oxímetro, Modelo JB02008 por un periodo de un año por defectos en la factura y materiales. Si un producto se juzga para estar bajo garantía, GF Health Products, Inc. proporcionarán, en su opción, (1) el reemplazo de cualquier pieza defectuosa o producto o (2) un crédito del precio de venta original hecho al cliente inicial de GF Health Products, Inc. La garantía no incluye ningún cargo de labor, incurrido en el reemplazo de piezas, instalación o cargos asociados a transportación o flete a GF Health Products, Inc.

▲ Precaución: Indica una situación de peligro o una práctica insegura que, si no es evitado, puede resultar en herida leve o daño al producto/propiedad.  
*Aviso: Proporciona recomendaciones para la aplicación y otra información útil para asegurar que obtengas lo más que puedes del producto.*  
⚠ Advertencias:  
**Importante!** Lee y entienda este manual antes de usar el oxímetro. No debe usar este aparato sin instrucciones provistas por un Profesional del Cuido de Salud. Si el oxímetro no es operado correctamente, heridas a la persona y/o daño al oxímetro puede resultar.  
Si los componentes están dañados o si le faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO DEBE usar piezas sustitutas.  
Es necesario inspeccionar el aparato antes de uso para asegurar que no hay daño visible que puede afectar al paciente o la seguridad del usuario o confiabilidad de medida. A partir de entonces, debe inspeccionar el aparato por lo menos una vez a la semana.  
GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad de daño o lesión causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este aparato.  
NO DEBE abrir la carcasa del oxímetro. No contiene partes servible. Servicio debe ser hecho por solamente por un ingeniero de servicios cualificado. Los usuarios no son permitidos a darles mantenimiento ellos mismos. Fallo del aparato y peligro puede ocurrir.

- No permita que ningún obstrucción (contaminación, cicatriz, esmalte, unas acrílicas etc.) esté en el sitio donde está colocado el sensor. Estas obstrucciones pueden afectar la señal recibidos por el sensor y puede resultar en una medida incorrecta.*  
*Ejercicio vigoroso y interferencia de un aparato electro quirúrgico pueden afectar la precisión de la medida.*
- Abra el aparato como se ve en la Figura 4.
  - Inserte su dedo en el cojín de goma (asegurase que su dedo está en la posición correcta).
  - Presione el Botón del Prender/Apagar y Mostrar.
  - La pantalla le enseñará los datos como se ve en la Figura 5. El usuario puede obtener la información directamente de la pantalla después de que se establece el valor.
  - Cuando la pantalla se ve como en la Figura 5, presione el Botón de Mostrar para cambiar la pantalla:



Figura 4  
operación



Figura 5

⚠ Advertencias continuadas:  
**PELIGRO DE EXPLOSIÓN:** No debe usar el oxímetro en la presencia de un ambiente con gas inflamable como agentes anestésicos, substancias explosivas, vapores o líquidos flamables.  
El oxímetro es diseñado para medidas rápidas. No es apto para monitoreo continuo por largos periodos de tiempo al paciente. NO DEBE aplicar el sensor al mismo dedo por más de dos horas. Si los resultados son anormales, favor de cambiar la posición del sensor.  
El oxímetro es utilizado como uno de los criterios para la evaluación del paciente. Debe ser usado en conjunto con señales clínicas y síntomas. Está diseñado como un aparato para medición, no para tratamiento.  
Campos eléctricas y magnético son capaces de interferir con los resultados correctos del oxímetro. Por esta razón, asegure que todos los aparatos externos operados en la vecindad del oxímetro cumplen con los requisitos de EMC. Celulares, equipo de radiografía, y aparatos de MRI pueden interferir porque emiten niveles altos de radiación electromagnéticos. Este aparato cumple con IEC60601-1-2.  
NO DEBE ser puesto en un edema o tejido tierno.  
La luz (la luz infrarrojo es invisible) emitido por el aparato le puede hacer daño a los ojos así que no debe fijarse en la luz. NO DEBE fijarse directamente a la luz.  
Este aparato debe estar guardado fuera del alcance de niños.

- Presione el Botón del Prender/Apagar y Mostrar una vez más, la pantalla se volteará 180 grados y mostrar como se ve en la Figura 6.
- Apreté el Botón de Mostrar una vez más, la pantalla se cambiara a la Figura 7.
- Presione el Botón del Prender/Apagar y Mostrar una vez más, la pantalla se volteará 180 grados y muestra como se ve en la Figura 8.
- Presione el Botón del Prender/Apagar y Mostrar una vez más, la pantalla se volteará -90 grados y mostrará también el pulso como gráfico de barra llenado de la forma de onda a lo largo de la parte inferior de la pantalla, como se ve en la Figura 9.
- Presione el Botón del Prender/Apagar y Mostrar una vez más, la pantalla ahora mostrará también el pulso como gráfico de barra hueco de la forma de onda a lo largo de la parte inferior de la pantalla, como se ve en la Figura 10.
- Presione el Botón del Prender/Apagar y Mostrar una vez más, la pantalla se volviera a la pantalla original como en la Figura 5 en la página anterior.



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10

SÍMBOLOS

Símbolo	Descripción
	Tipo BF
	Advertencia: Vea el Manual
	La saturación de oxígeno de pulso
	Frecuencia de Pulso (latidos por minuto)
	Voltaje bajo de las baterías
	Número Serial
	No es apto para monitoreo continuo al paciente

11

12

13

14

15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de Mostrar	Pantalla de LED orgánico
Requisito de suministro eléctrico	Dos 1.5V AAA baterías alcalinas
Especificaciones Parámetro de SpO <sub>2</sub>	Rango de Medida: 0%-100%
	Presión: 70%-100%, ±3%; < 70%, ninguna definición
Especificaciones de Frecuencia de Pulso	Rango de Medida: 30-235 bpm (latidos por minuto)
	Presión: 30-99 bpm, ±2 bpm; 100-235 bpm, ±2%
Dimensiones (L x W x H)	2.28" x 1.26" x 1.34" (58 mm x 32 mm x 34 mm)
Ambiente	Operación: 41°F - 104°F (5°C - 40°C), 15% - 80% RH
	Almacenaje: -4°F - 158°F (-20°C - 70°C), < 93% RH
Peso Neto	2 onzas. (50g) con baterías

Especificaciones Técnicas Continuas	
Clasificación	El tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipo con motor interior
	El grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicado de Tipo BF
	El grado de protección contra un inmersión de líquidos dañinos: Equipo ordinario sin protección contra inmersión de agua
	Compatibilidad Electromagnético: Grupo I, Clase B

USA Jefaturas Corporativas :  
GF Health Products, Inc.  
2935 Northeast Parkway  
Atlanta, Georgia 30360  
© 2009 GF Health Products, Inc.  
Fabricado en China  
tel: 800-347-5678, 770-447-1609  
fax: 800-726-0601, 678-291-3232



GRAHAM-FIELD  
[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Graham-Field y John Bunn son marcas registradas de GF Health Products, Inc.  
El embalaje, garantías, productos y especificaciones son sujetos a cambiar sin aviso.  
GF Health Products, Inc. no es responsable por errores tipográficos.

16

17

18

19